



Installation de Optimum+ TWAIN

Utilisez les fichiers d'installation de l'application TWAIN et suivez les instructions pour installer.


Double-cliquez le fichier d'installation : **“Setup_optimum+Twain_x32.exe”**.

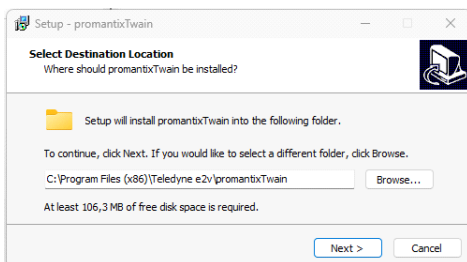


Il vous demandera où installer, laissez simplement le chemin par défaut tel quel et cliquez sur **“Next”** pour démarrer l'installation.

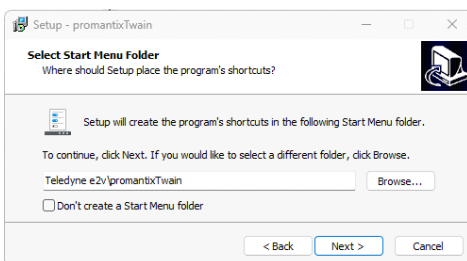


Une fois de plus, laissez le répertoire par défaut et cliquez sur **“Next”**.

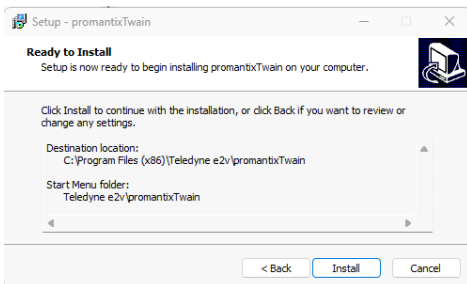


Sur cette fenêtre, cliquez sur **“Install”** pour démarrer l'installation.

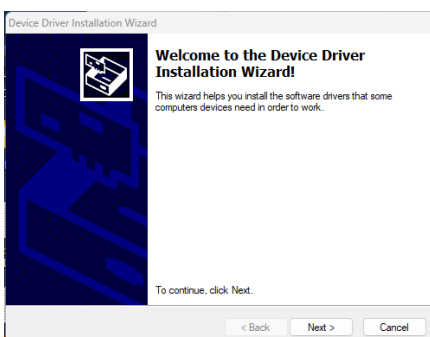


Lorsque vous verrez cette fenêtre, cliquez simplement sur le bouton **“Next”**.

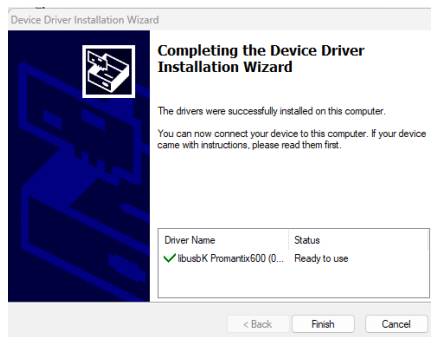


Une fois cette partie terminée, vous verrez cette fenêtre. Cliquez sur **“Finish”**.

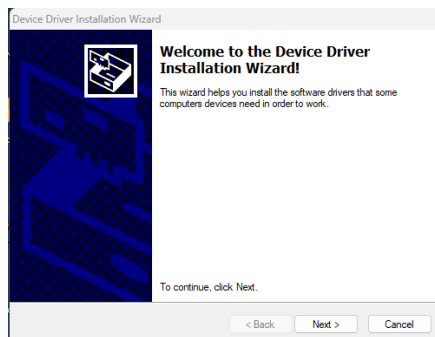

Une nouvelle fenêtre apparaîtra, cliquez sur **“Next”**.

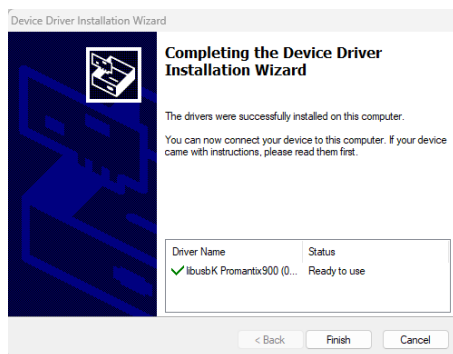

Lorsque vous voyez cette fenêtre, cliquez sur **“Finish”** pour continuer.

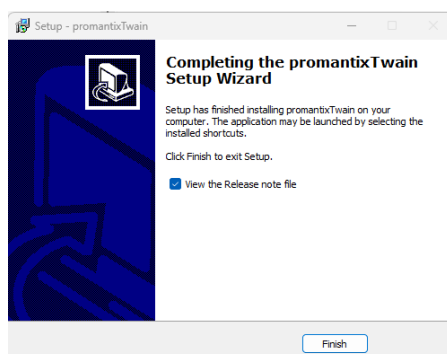

Lorsque cette fenêtre apparaît, l'installation est terminée.

Vous pouvez lire ou non les notes de version. Si vous n'y tenez pas, décochez le champ **“View the Release note file”**.

Cliquez sur **“Finish”** pour fermer l'installation.

Ceci doit être fait sur TOUT les ordinateurs que vous voulez utiliser avec le capteur.

Pour de l'assistance contactez le Support Technique de **CADI**.